

OPERCAT ist ein innovativer und hoch moderner Katheterverband, der nicht nur die Anforderungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und anderer nephrologischer Fachgesellschaften (wie GHIA oder GHEAP) erfüllt, sondern darüber hinaus Vorteile im Vergleich zu sterilen Wundbettplastern in der Versorgung von Kathetern bietet.

Verfügbare Größen

OPERCAT ist in folgenden Größen und Verpackungsvarianten verfügbar:

Art.-Nr.	Produkt	VE / Karton
0037438	OPERCAT classic 8 x 7,5 cm geeignet für gebogene Katheter (Femoralis/Subclavia) und Ernährungssonden PZN 09771667	25 St. / 375 St.
0037448	OPERCAT classic 16 x 5 cm geeignet für gerade Katheter (Femoralis/Subclavia) wie Permcath und Hickman PZN 09771673	25 St. / 350 St.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:



BREU GmbH 
Dialysebedarf

Innstraße 12
85640 Putzbrunn

Tel. 089 74140620
Fax 089 7192186

www.breugmbh.com
info@breugmbh.com

OPERCAT classic

Der innovative Katheterverband



- steriles Einmalprodukt
- zugfreie Fixierung von Kathetern
- Schutz vor Mikroorganismen
- schnelle und einfache Anwendung
- hoher hygienischer Standard und aseptische Bedingungen und Sterilität rund um den Katheter
- keine Klebereste am Katheter
- hoher Tragekomfort ohne Druckstellen
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

Die Pflege von Dialysekathetern und die Auswahl der entsprechenden Verbandsmittel sind von großer Bedeutung, da sie die Aufrechterhaltung der Funktionalität sowie den Schutz vor Infektionen gewährleisten müssen.

OPERCAT ist eine sterile selbstklebende Einmalverbandstasche für Kurzzeit- und Langzeitkatheter. Die Verbandstasche ist innen und außen mit einer speziellen Beschichtung versehen, die eine Barriere gegenüber Mikroorganismen darstellt. Somit werden die Katheterenden und die Katheteraustrittsstelle (KAST) nicht nur vor mechanischen Verletzungen geschützt, sondern auch vor Kontamination.

Die glatte Oberfläche der Verbandstasche gewährleistet eine zugfreie und sichere Fixierung des Katheters und schließt somit jegliche mechanische Einflüsse wie Rotation des Katheters aus. Zur Vorbeugung von Druckstellen nimmt OPERCAT ein wenig Wasserdampf aus der Umgebungsluft auf und polstert sich dadurch etwas aus.

Unabhängig davon ist OPERCAT mit einer MVTR-Rate von 4.000 g/m²/24h sehr wasserdampfdurchlässig. Somit ist ausgeschlossen, dass sich unter dem Verband feuchte Kammern bilden können.

Trotz der hohen Wasserdampfdurchlässigkeit ist OPERCAT nicht wasserdicht und deshalb nicht als Duschverband geeignet.


- A** dehnbare Fixiervlies, das aufgrund seiner Klebkraft eine perfekte Fixierung ermöglicht
- B** Verlängerung der Verbandstasche zum Schutz der KAST
- C** gefaltete Schutzhüllen vereinfachen das Anbringen unter sterilen Bedingungen
- D** Verbandstasche mit perfekter Auspolsterung des Katheters und Barriere gegenüber Mikroorganismen aufgrund der Beschichtung




Anwendung

Die richtige Größe des OPERCAT-Verbandes auswählen und aus der Verpackung herausnehmen.

Den Katheter in die Tasche einführen. Die Öffnung der Tasche muss in Richtung zum Patienten zeigen.

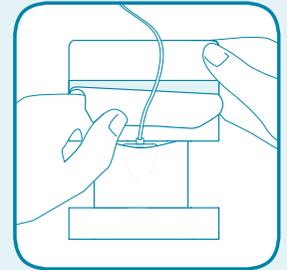

Entfernen Sie oben die untere silikonbeschichtete Schutzfolie und fixieren OPERCAT an der richtigen Stelle.

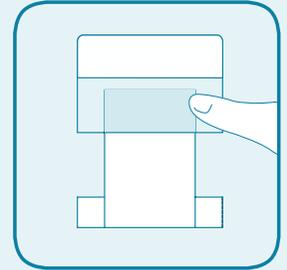

Entfernen Sie oben die obere silikonbeschichtete Schutzfolie und fixieren OPERCAT am Körper des Patienten. Im Anschluss entfernen Sie unten noch die schmale Schutzfolie und fixieren OPERCAT nun komplett.

